



Euroseal® - Euroseal® Valida Euroseal® 2001 Plus - Euromatic® Plus

ESPAÑOL

EURONDA



Euromatic® Plus. Máxima seguridad, mínimo esfuerzo.

Euromatic® Plus es la termoselladora que simplifica y acelera el trabajo, garantizando la validación del proceso de sellado de conformidad con las normas EN11607-2 y EN868-5. Tan sólo hay que insertar la bolsa que contiene los instrumentos y Euromatic® Plus tira de ella hasta sellarla completamente. La velocidad de sellado de 8 m por minuto permite embolsar muchos instrumentos en poco tiempo y el sellado multibanda asegura un resultado perfecto y duradero. El cuadro de mandos ayuda a elegir las funciones, evitando errores y pérdidas de tiempo, y permite regular la temperatura para un sellado óptimo con cada tipo de papel.





No más preocupaciones, ella se encarga de todo.


Euromatic® Plus lo tiene todo pensado. Gracias a la impresora integrada, imprime directamente en la bolsa, antes de sellarla, los datos que selecciona el operador, utilizando tinta eco-compatible a base de agua que se seca al instante. Además, el puerto USB permite archivar los datos de las operaciones efectuadas (fecha, hora y número de sellado, lote, operador, temperatura, velocidad, presión, etc.). Cuando es necesario, Euromatic® Plus alerta al operador mediante una señal acústica. Además, cuenta con accesorios como la superficie frontal deslizante en acero y el portarrollos con cortadora de banco.

● Conózcalo más a fondo:



- **VALIDACIÓN DEL PROCESO DE SELLADO**

Página 18

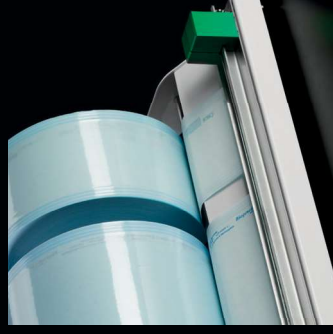

ASPECTOS TÉCNICOS AVANZADOS



VALIDACIÓN DEL PROCESO DE SELLADO

EUROSEAL 'VALIDA Y EUROMATIC' PLUS COMPRUEBAN, REGISTRAN Y ARCHIVAN EN UNA TARJETA SD O EN UN USB LOS DATOS RELATIVOS A LAS OPERACIONES DE SELLADO EFECTUADAS (FECHA, HORA, NÚMERO DE SELLADO, LOTE, OPERARIO, TEMPERATURA, VELOCIDAD, PRESIÓN) DE PLENA CONFORMIDAD CON LA NORMA EN1607-2 SEGÚN LA CUAL LOS PARÁMETROS CRÍTICOS DEL PROCESO DE SELLADO SE DEBEN MONITORIZAR DE FORMA SISTEMÁTICA Y DOCUMENTAR PARA PODER COMPROBARLOS Y TRAZARLOS CUANDO SEA NECESARIO.

EUROMATIC® PLUS TAMBIÉN IMPRIME DIRECTAMENTE EN LA BOLSA LOS DATOS SELECCIONADOS POR EL OPERADOR



CONECTIVIDAD TOTAL

EUROSEAL 'VALIDA, AL IGUAL QUE EL AUTOCLAVE E9 RECORDER, DISPONE DE UNA TOTAL CONECTIVIDAD INTEGRADA. A TRAVÉS DE ETHERNET ES POSIBLE TRANSMITIR LOS DATOS DE LOS LOTES DE SELLADO AL ORDENADOR. ADEMÁS, CON LA TARJETA SD INTEGRADA, ES POSIBLE TRANSFERIRLOS RÁPIDAMENTE AL ORDENADOR PARA ARCHIVARLOS Y GESTIONARLOS DE FORMA EXTREMADAMENTE SENCILLA. POR ÚLTIMO, EL ACCESORIO E-WIFI PERMITE CONECTAR EUROSEAL 'VALIDA A UN ORDENADOR, SMARTPHONE O TABLET SIN NECESIDAD DE CONEXIÓN POR CABLE.



CICLOS PRECONFIGURADOS Y CICLO LIBRE

EUROSEAL 'VALIDA PERMITE ESCOGER ENTRE CICLOS DE SELLADO PRECONFIGURADOS COMO EUROSTERIL', Y EL CICLO LIBRE CON EL QUE SE PUEDE REGULAR EL PARÁMETRO DE LA TEMPERATURA, PARA SELLAR CUALQUIER TIPO DE SOBRE O ROLLO, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA CONSULTA.

FICHA TÉCNICA

EUROSEAL®

DIMENSIONES DEL APARATO	ESTÁNDAR 440x315x390 mm (LxHxP) CON DOBLE PORTARROLLOS 440x420x390 mm (LxHxP) CON PORTARROLLOS EN LA PARED
PESO	7,1 Kg
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	200 - 240 V (100 - 120 V; 50/60 Hz)
CONSUMO DE ENERGÍA	100 W
DIMENSIONES DE SELLADO	12x310 mm
TEMPERATURA DE SELLADO	CONSTANTE, ENTRE 170 Y 200°C

EUROSEAL® VALIDA

DIMENSIONES DEL APARATO	ESTÁNDAR 500x315x490 mm (LxHxP) CON DOBLE PORTARROLLOS 500x420x490 mm (LxHxP) CON PORTARROLLOS EN LA PARED
PESO	8,3 Kg
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	200 - 240 V; 50/60 Hz
CONSUMO DE ENERGÍA	100 W
DIMENSIONES DE SELLADO	12x310 mm
TEMPERATURA DE SELLADO	VARIABLE, ENTRE 170 Y 190°C

EUROSEAL® 2001 PLUS

DIMENSIONES DEL APARATO	ESTÁNDAR 445x198x 85 mm (LXHXP)
PESO	7,6 Kg
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	200-240V (100-120V; 50/60 HZ)
CONSUMO DE ENERGÍA	100 W
DIMENSIONES DE SELLADO	12x310 mm
TEMPERATURA DE SELLADO	CONSTANTE, ENTRE 170 Y 200°C

EUROMATIC® PLUS

DIMENSIONES DEL APARATO	ESTÁNDAR 473x220x235 mm (LxHxP)
PESO	14 Kg
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	200 - 240 V; 50/60 Hz
CONSUMO DE ENERGÍA	500 W
DIMENSIONES DE SELLADO	12,5x310 mm
TEMPERATURA DE SELLADO	VARIABLE, ENTRE 20-200°C

CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS Y NORMAS DE REFERENCIA

Directiva EMC 2004/108/CE
Normas aplicadas: EN 61326
Directiva de baja tensión 2006/95/CE
Normas aplicadas: EN 61010-1

CUMPLIMIENTO DEL SELLADO

UNI EN 868-5 - EN ISO 11607-2

CERTIFICACIONES

- Empresas:
ISO 13485
ISO 9001

CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS Y NORMAS DE REFERENCIA

Directiva EMC 2004/108/CE
Normas aplicadas: EN 61326
Directiva de baja tensión 2006/95/CE
Normas aplicadas: EN 61010-1

CUMPLIMIENTO DEL SELLADO

UNI EN 868-5 - EN ISO 11607-2
DIN 58953-7:2010

CERTIFICACIONES

- Empresas:
ISO 13485
ISO 9001

CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS Y NORMAS DE REFERENCIA

Directiva EMC 2004/108/CE
Normas aplicadas: EN 61326
Directiva de baja tensión 2006/95/CE
Normas aplicadas: EN 61010-1

CUMPLIMIENTO DEL SELLADO

UNI EN 868-5 - EN ISO 11607-2

CERTIFICACIONES

- Empresas:
ISO 13485
ISO 9001

CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS Y NORMAS DE REFERENCIA

Directiva máquinas 2006/42/CE
Normas aplicadas: EN ISO 12100
EN ISO 13857 EN 60204-1
Directiva EMC 2004/108/CE
Normas aplicadas: EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3
EN 55014-1 - EN 55014-2
Directiva baja tensión 2006/95/CE
Normas aplicadas: EN 60204-1

CUMPLIMIENTO DEL SELLADO

UNI EN 868-5 - EN ISO 11607-2

CERTIFICACIONES

- Empresas:
ISO 13485
ISO 9001